



**Proposez pour votre patient  
un matelas d'aide à la prévention  
des escarres de type Classe 1b**




Matelas à usage médical

**Depuis 1985 la Référence Hospitalière**

**1<sup>er</sup> matelas ergonomique préventif des escarres et des lombalgies.**

Constitué de plots indépendants et amovibles de hauteurs et de densités différentes

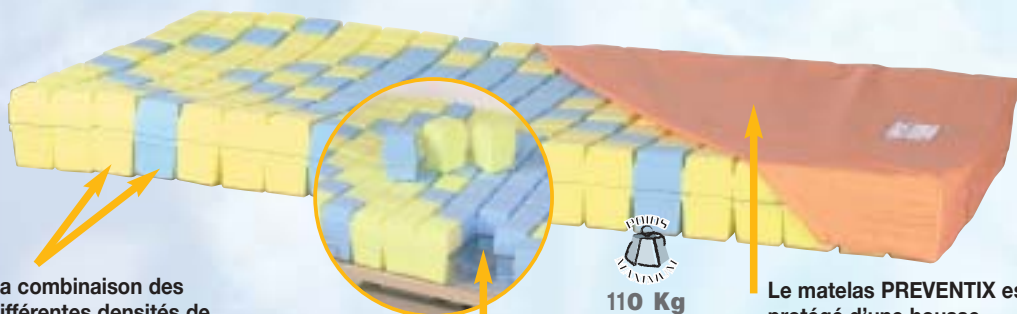

La combinaison des différentes densités de mousse assure une meilleure prévention et un plus grand confort.



Sa structure de PVC souple permet au matelas de s'adapter à toutes les inclinaisons et à toutes les morphologies.

Le matelas PREVENTIX est protégé d'une housse intégrale et amovible en polyuréthane TEXTIX HPR03, zippée 3 cotés. Le dessous de celle-ci laisse passer l'air pour ventiler le matelas et lutter contre les effets de macération.



#### NOUVEAU

- Des rangées de 5 plots sont solidaires sur le dessus garantissant une meilleure longévité du système lors de l'utilisation intensive du relèvement buste.
- Faciles et rapides à insérer, elles permettent au système de prolonger son utilisation.

#### La housse TEXTIX HPR03 :

- Polyuréthane M1
- Imperméable aux liquides
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bactériostatique
- Fongistatique
- Lavage en machine à 90°
- Séchage à 60°



Un système enfin aux normes de sécurité incendie : En effet PREVENTIX est conforme à la recommandation D1bis-89 "test à la cigarette" du GEPM/CP ainsi que la EN-NF 597 parties 1 et 2.

**Libellé de l'ordonnance :**  
**Matelas PREVENTIX Classe 1b**



Score NORTON  
< 14  
risque moyen  
avec stade 1 et 2

## **Proposez pour votre patient un matelas d'aide à la prévention des escarres de type Classe 2**



**Constitué d'une partie supérieure de mousse viscoélastique et d'une partie inférieure de mousse H.R. haute résilience avec une découpe spécifique.**



110 Kg

**La découpe inférieure assure au système une grande mobilité lui permettant de suivre parfaitement la cinématique de tous les lits médicalisés.**

Viscolux® est une mousse viscoélastique dite à mémoire de forme.

Viscolux® :

- S'adapte absolument à toutes les morphologies.
- Assure une réelle empreinte du corps, créant un moule naturel.
- Garantie une immersion totale de l'ensemble du corps soulageant les pressions d'interfaces au niveau des saillies osseuses.
- Augmente la surface de contact répartissant et réduisant les pressions au niveau des points d'appui.



Le contact, la souplesse de Viscolux® procure une sensation nouvelle de flottaison.



CARGUMIXT est protégé d'une housse intégrale CARTEX

### **La housse CARTEX :**

- Polyuréthane M1
- Imperméable aux liquides
- Perméable à la vapeur d'eau
- Bactériostatique
- Fongistatique
- Lavage en machine à 90°
- Séchage à 60°



Des systèmes enfin aux normes de sécurité incendie :  
En effet CARGUM et CARGUMIXT sont conformes à la recommandation D1bis-89 "test à la cigarette" du GEPM/CP ainsi que la EN-NF 597 parties 1 et 2.



**Libellé de l'ordonnance :  
Matelas CARGUMIXT Classe 2**

Score NORTON  
< 14  
risque moyen  
avec stade 1 et 2

**Proposez pour votre patient  
un matelas d'aide à la prévention  
des escarres de type Classe 2**



**Le Surmatelas en mousse viscoélastique permet une utilisation de tous types de matelas cliniques. Il se transporte facilement pour les voyages prolongés**




**Libellé de l'ordonnance :  
Surmatelas CARGUM Classe 2**



**110 Kg**




**Un système prêt à l'emploi :  
Pour votre service CARPENTER a assemblé dans une housse CARTEX  
spéciale le Surmatelas CARGUM et un matelas clinique HAD.**

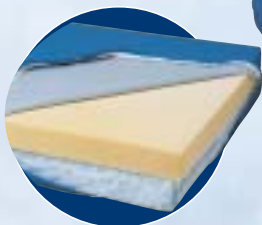

**Libellé de l'ordonnance :  
Matelas CARGUM Classe 2  
Surmatelas simple (code : 101A04.1)**



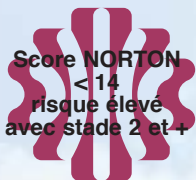


## **Proposez pour votre patient un matelas d'aide à la prévention des escarres de type Classe 2**

**Surmatelas thérapeutique original non motorisé, adaptable et réparti en zones.  
Les quatre sections peuvent s'adapter aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.**



**associent leurs différentes technologies pour créer la nouvelle gamme.**

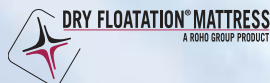

**Les performances reconnues de la flottaison sèche du surmatelas ROHO® associées aux performances de la mousse Viscolux® (mousse visco-élastique) assurent aux nouveaux systèmes EVOLUTION2, EVOLUTION3 et EVOLUTION4 d'être les meilleurs compromis pour les supports non motorisés, d'aide à la prévention et au traitement des escarres de stade 2, 3 et 4.**

### **Les 4 principes de la technologie DRY FLOATATION**



6 degrés  
de liberté



Faible tension  
superficielle



Force de rappel  
constante



Cisaillement et  
friction minimisés

**La housse du système EVOLUTION a été spécialement étudiée pour ne pas altérer les performances de celui-ci.  
Conçu avec un polyuréthane spécial (imperméable aux liquides et perméable à la vapeur d'eau), elle garantit une parfaite protection et un confort exceptionnel pour l'utilisateur.**



**Libellé de l'ordonnance :  
Surmatelas ROHO Classe 2  
+ Matelas clinique simplifié**

